

Eingeber für Boli – Anleitung zur sicheren Anwendung

Benötigte Materialien / Vorbereitung

Gebraucht werden ein Eingeber für Boli, Bolus/Magnet für das Tier, Handschuhe und Hygienische Arbeitsunterlagen

Vor der Anwendung sollte das Tier ruhig stehen und ausreichend gesichert sein, damit keine Verletzungen entstehen. Hände und Gerät müssen hygienisch vorbereitet werden. Der Bolus oder Magnet wird korrekt aus dem Vorratsbehälter entnommen und in den Applikator gelegt.

Anwendung

1. **Positionieren des Tieres:** Das Tier sollte ruhig stehen und fixiert sein.
2. **Einführen des Applikators:** Den Applikator vorsichtig in den hinteren Bereich des Mauls oder Rachenraums einführen, ohne Gewalt anzuwenden.
3. **Eingabe des Bolus:** Den Bolus vorsichtig in den Schlund des Tieres eingeben. Dabei sicherstellen, dass der Bolus vollständig geschluckt wird.
4. **Rückzug des Applikators:** Applikator vorsichtig entfernen, dabei das Tier weiterhin stabil halten.
5. **Nachkontrolle:** Beobachtung des Tieres, ob Bolus geschluckt wurde und keine Atem- oder Schluckprobleme auftreten.


Ergebnisse

Mit Bolus und dem passenden Eingeber können Rinder gezielt, stressarm und effizient mit Mineralstoffen, Spurenelemente, Vitaminen oder Medikamenten versorgt werden, wodurch Gesundheit, Vitalität, Milchleistung und Fruchtbarkeit verbessert werden sowie präventiv Mangelercheinungen und Krankheiten reduziert werden können.



Sicherheitshinweise

- Nur durch erfahrenes Personal oder Tierärzte anwenden.
- Tier vorsichtig sichern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Keine Gewalt anwenden, um Bolus durchzudrücken.
- Gerät nach jedem Einsatz reinigen und desinfizieren.
- Nach der Gabe das Tier beobachten, um sicherzustellen, dass der Bolus vollständig geschluckt wurde.

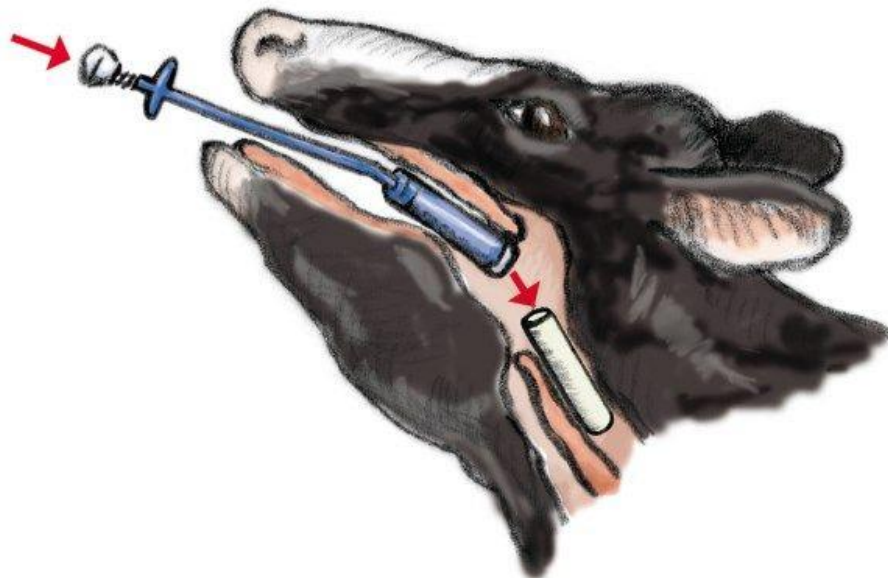

Eine Eingabe von Boli ersetzt nicht die Beratung durch einen Tierarzt!