

Istruzioni per il prelievo del campione

Analisi: esami colturali su feci / tampone rettale

Ricerca (codice di accettazione):

- *Salmonella, Shigella, Campylobacter* (31COPRO)
- *Yersinia* (31YER)
- *Campylobacter* (31CAMPY)
- *Salmonella* (31SAL)
- *Shigella* (31SHIG)

Sistema di raccolta/contenitore:

- **Contenitore con spatola**
- **Kit Fecal Swab: tappo verde e tampone**



Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore:

- Pazienti esterni: Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, farmacia
- Reparti e ambulatori ospedalieri: Ordinabile tramite la farmacia ospedaliera

Dove consegnare dopo la raccolta: in qualsiasi Centro prelievo dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Per orari di apertura si veda sito <https://www.asdaa.it/it/distretti-sanitari.asp>

Quando: il prima possibile; nel caso si rendesse necessario, il campione può essere conservato in frigorifero per non più di 24 ore (non congelare!).

Contenitore con spatola



- Raccogliere almeno 1 cm³ di campione di feci nel contenitore
- Inviare il contenitore al laboratorio

Tampone rettale




- Raccogliere le feci in un contenitore pulito, non necessariamente sterile.
- Immergere il tampone nel campione di feci

o prelievo diretto

- Inserire il tampone a livello rettale finché la linea colorata sull'asticella rimane visibile

Feci e Tampone rettale

- Svitare il tappo verde del contenitore FecalSwab e inserire il tampone, con la porzione distale immersa nel liquido di trasporto
- Spezzare l'applicatore nel punto in cui l'asticella diventa più sottile (NB: non al livello dalla linea colorata), facendo leva sull'orlo della provetta
- Riavvitare bene fino in fondo il tappo verde sulla provetta.
- Scrivere sull'etichetta della provetta il nome del paziente e la consistenza delle feci: Formate (F), Semiformate (SF), Liquide (L)

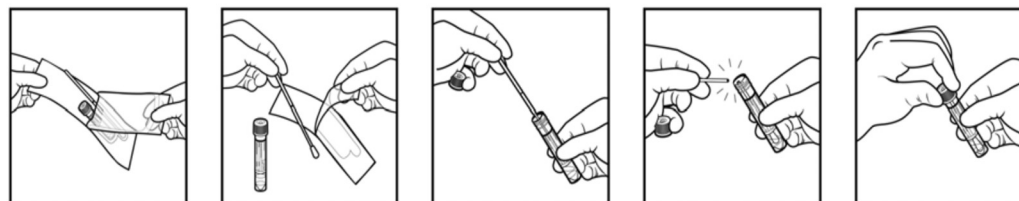

IMPORTANTE: per il prelievo di feci per le altre ricerche (p.e. ossiuri, parassiti) utilizzare i contenitori specifici!