

Anweisungen für die Gewinnung des Probenmaterials

Analysen: Kultur auf Dermatophyten

Untersuchungen (Annahmekodex):

- Dermatophyten (DERM)

Probenbehälter:

- eSwab **rosa** Verschluss (Standardabstrich)
- Steriler Behälter



Wo man den Probenbehälter einholen kann






- Externe Patienten: Blutabnahmestellen – Südtiroler Gesundheitsbetrieb
- Abteilungen und Ambulatorien des Krankenhauses:
 violetter Verschluss: Magazinkodex 5055468
 steriler Behälter: Magazinkodex 506007

Wo man die Probenbehälter abgeben kann:

Ist eine Probe NICHT mit Blutproben kombiniert, kann diese nur im LMV-BZ (Labor für Mikrobiologie und Virologie) oder im LPC-BZ (Zentrallabor für klinische Pathologie des Krankenhaus Bozen) in den, laut Homepage [Labore | Gesundheitsbetrieb \(sabes.it\)](http://labore.gesundheitsbetrieb.sabes.it) vorgegebenen Zeiten, abgegeben werden. Eine Vormerkung ist NICHT nötig!

Wann: sobald als möglich; bei Notwendigkeit kann die Probe im Kühlschrank für nicht mehr als 24 Stunden (nicht einfrieren!) aufbewahrt werden.

- *Nägel:* das Auftragen von Nagellack oder Salbe vermeiden und eine Woche vor der Probenentnahme nicht die Nägel schneiden
- *Haut/Schuppen:* die Schuppen sammeln und einige Tage vor der Analyse kein Medikament auftragen
- *Haare:* einige Haare ausreißen (nicht schneiden)
- Den Umschlag mit dem **Kit eSwab** (Abstrich und Transportröhrchen) öffnen, den Abstrich herausnehmen und die Abnahme durchführen
- Den **rosa** Verschluss des eSwab und den Abstrich einführen
- Das Tupferstäbchen an der farbigen Linie abbrechen, dabei den Röhrchenrand als Stütze verwenden
- Den Verschluss vollständig auf das Transportgefäß aufschrauben
- Auf das Etikett des Transportröhrchens den Namen des Patienten schreiben

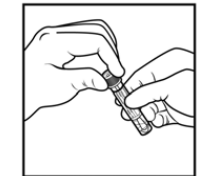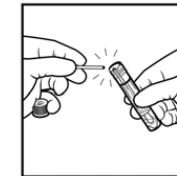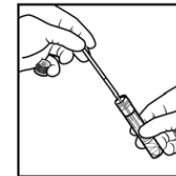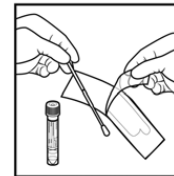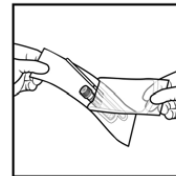

Eventuell kann das Material in einen sterilen Behälter gegeben werden.